

# **inFace**

Peeling kawitacyjny z jonizacją

Instrukcja obsługi

# Funkcje produktu

- usuwanie zaskórników
- głębokie oczyszczanie
- pomoc w procesie odżywiania skóry
- lifting i ujędrnianie

## Środki ostrożności

**Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją celem wykorzystania w przyszłości,**


- Nie używaj produktu jeżeli jest uszkodzony lub zdeformowany.
- Produktu nie należy stosować w miejscach takich jak oczy, szyja, uszy, okolice żył, aby nie doprowadzić do uszkodzenia skóry.
- Produkt nie może być stosowany w miejscach ze stanem zapalnym skóry, zaczerwienieniem, ranami lub w miejscach po zabiegach kosmetycznych.
- Nie stosować w miejscach, na których występuję skóra z odczynami chorobowymi lub alergicznymi a także oparzeniami słonecznymi lub hiperplazją blizn.
- Osoby, które posiadają podskórne metalowe implanty lub w których ciele znajdują się urządzenia takie jak np. rozrusznik serca, wewnętrzne defibrylatory, aparaty słuchowe a także osoby po operacjach plastycznych nie mogą stosować tego produktu.
- Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
- Osoby, które przeszły jakiegokolwiek operacje, przed rozpoczęciem użytkowania, powinny skonsultować się z lekarzem.
- Produkt należy trzymać z dala od dzieci i nie pozwolić im na zabawę tym produktem.
- Produktu nie należy przechowywać w środowisku o wysokiej temperaturze, wilgotności, kurzu lub w pobliżu źródła ognia.
- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu.
- Jeżeli produkt nie będzie używany dłużej niż przez siedem dni, należy odłączyć główny korpus oraz kabel do ładowania, wyłączyć zasilanie i odłożyć produkt w bezpieczne miejsce do przechowywania.

# Opis produktu oraz zawartość opakowania

## Peeling kawitacyjny

### Instrukcja obsługi

Pokrywa przeciwkurzowa  
Szpatułka

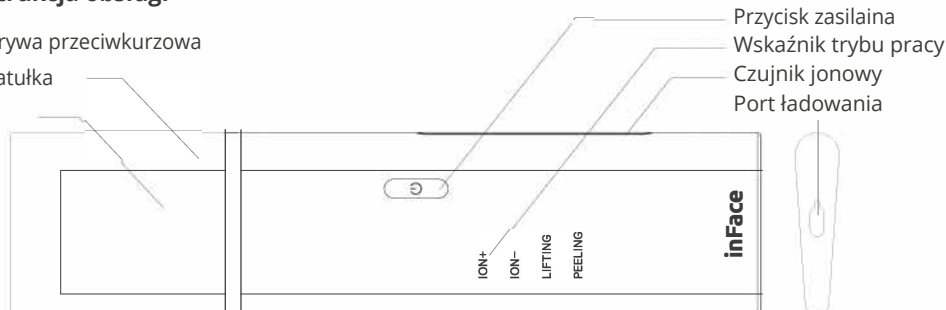

Uwaga! zdjęcie oraz opis istotnych cech produktu mają wyłącznie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniego powiadomienia.

## Parametry produktu

Nazwa produktu:: Peeling kawitacyjny z jonizacją

Model:CF-06F

Rozmiar produktu: 172.6x 44.8 x17.8 mm

Waga netto:: 1080g

Pojemność akumulatora: 500 mAh

Wejście ładowania: 5V=1A

Napięcie znamionowe: 3.7V=

Moc znamionowa: 2.5W

Czas ładowania: około 2 godziny

Czas użytkowania: Około 60minut

Klasa wodoszczelności:: IPX6

## Instrukcja użytkowania

[1] W stanie wyłączenia długo naciśnij przycisk zasilania przez 1.5s, aby włączyć wszystkie wskaźniki trybu zaświecą się na biało przez 1 sekundę a następnie produkt wejdzie w tryb czyszczenia PEELING (domyślne ustawienie). Odpowiedni wskaźnik trybu zaświeci się na biało.

[2] W stanie włączonym naciśnij krótko przycisk zasilania aby przełączyć tryb PEELING-LIFTING-ION-ION+, a wskaźnik odpowiedniego trybu zaświeci się na biało.

[3] W stanie włączonym naciśnij długo przycisk zasilania przez 1.5s, aby wyłączyć urządzenie a wskaźnik trybu będzie wyłączony.

[4] Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach pracy w każdym trybie, jeśli chcesz kontynuować pracę naciśnij przycisk zasilania przez 1,5 sekundy aby ponownie uruchomić urządzenie.

# Instrukcja użytkowania



## PEELING

[1] Należy zwilżyć twarz wodą, następnie przyłożyć gorący ręcznik lub użyć plastra eksportującego zaskórniki.

[2] Trzymaj szpatułkę wewnętrzną stroną, przyłóż ją do skóry przesuwaj szpatułkę powoli w kierunku porów aby rozpocząć ich głębokie usuwanie.



## LIFTING

[1] Nałóż na twarz krem lub olejek esencjalny.

[2] Trzymaj czujnik jonowy po obu stronach produktu, trzymaj szpatułkę skierowaną na zewnątrz i blisko skóry, przesuwaj ją powoli wzdłuż kontur twarzy od dołu do góry podnosząc i napinając skórę.

Przed rozpoczęciem zabiegu należy zwilżyć skórę. Podczas pracy szpatułka będzie nieco gorąca dlatego nie należy jej przykładać w jedno miejsce na skórze na dłużej niż 3 sekundy.



## ION-

[1] Nałóż na twarz tonik lub emulsję.

[2] Przytrzymaj czujnik jonowy po obu stronach produktu, trzymaj szpatułkę skierowaną na zewnątrz i blisko skóry, przesuwaj szpatułkę powoli wzdłuż konturów twarzy od dołu do góry głęboko wprowadzając produkty do pielęgnacji skóry.



## ION+

[1] Nałóż tonik na twarz.

[2] Przytrzymaj czujnik jonowy po obu stronach produktu, trzymaj szpatułkę skierowaną na zewnątrz i blisko skóry, przesuwaj szpatułkę powoli wzdłuż konturów twarzy od dołu do góry i ponownie oczyść pozostałe na skórze zanieczyszczenia.

## Wskazówki

- Należy pamiętać, aby przed zabiegiem nawilżyć skórę i nigdy nie stosować produktu na suchej skórze.
- W trakcie pracy szpatułka będzie nieco gorąca, dlatego należy przesuwać ją po skórze i nie pozostawiać w jednym miejscu na dłużej niż 3 sekundy aby nie uszkodzić skóry.
- Podczas zabiegu należy przykładać szpatułkę pod kątem 45° w stosunku do skóry.
- Podczas korzystania z trybu ,LIFTING,ION- i ION+ należy trzymać czujnik jonowy po obu stronach produktu. Produkt może działać skutecznie tylko wtedy gdy szpatułka styka się ze skórą.
- Zaleca się stosowanie produktu 2 - 3 razy w tygodniu.

# Instukcje ładowania

- Przed pierwszym użyciem należy naładować produkt w pełni.
- Do ładowania należy używać kabla do ładowania dostarczonego z tym produktem.
- Podczas ładowania, upewnij się, że całe urządzenie jest suche.
- Podczas ładowania, wszystkie wskaźniki trybu migają cyklicznie na biało, a produkt nie działa.
- Po pełnym naładowaniu wszystkie wskaźniki będą się świecić na biało.
- Gdy moc akumulatora będzie poniżej 10%, pojawi się sygnał dźwiękowy, wszystkie wskaźniki zamigają trzy razy a następnie produkt wyłączy się automatycznie.
- Zarówno produkt jak i kabel należy przechowywać w odpowiedni sposób. Nigdy nie zaginaj, nie skręcaj ani nie rozciągaj kabla, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia.

## Czyszczenie i konserwacja

- Po użyciu należy wyczyścić szpatułkę używając do tego suchej i miękkiej szmateczki lub ręcznika papierowego
- Zabrania się używania ostrych przedmiotów oraz żrących detergentów do czyszczenia produktu.
- Produkt należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Należy unikać upuszczania, uderzania produktu.
- Nie wolno samodzielnie demontować ani naprawiać produktu.
- W sprawach związanych z konserwacją należy skontaktować się z handlowcem.

## Rozwiązywanie problemów

Problem: Ból podczas użytkowania.

Rozwiązanie:

- Stosuj produkt tylko na nawilżoną skórę.
- Pamiętaj o prawidłowym użytkowaniu oraz prawidłowym przesuwananiu szpatułki po skórze.
- Czas korzystania z jednego trybu nie powinien przekraczać 5 minut.

Problem: Nie można oczyścić zaskórника.

Rozwiązanie:

- Przed rozpoczęciem zabiegu należy przyłożyć gorący ręcznik do skóry, aby otworzyć pory lub użyć odpowiedniego plastra eksportującego zaskórnik przez 10 minut.
- Podczas używania, trzymaj szpatułkę twarzą do wewnątrz i blisko skóry, przesuwasz szpatułkę powoli w kierunku porów.

Problem: Podczas stosowania pojawia się głośny dźwięk.

Rozwiązanie: Kiedy szpatułka jest stosowana na skórę czoła lub znajduje się przy kościach policzkowych może wystąpić dźwięk brzęczenia ze względu na ultra-wysoką częstotliwość. W takiej sytuacji należy trzymać szpatułkę pod kątem 90° prostopadle do skóry, aby zmniejszyć obszar kontaktu szpatułki, a dźwięk (brzęczenie) ulegnie złagodzeniu.

Problem: Produkt nie ładuje się.

Rozwiązanie: Należy sprawdzić czy w trakcie ładowania migają wszystkie wskaźniki, czy kabel do ładowania lub gniazdko elektryczne nie są uszkodzone lub nie występują inne nieprawidłowości podczas ładowania. Czas pełnego ładowania wynosi około 2 godziny.

# Rozwiązywanie problemów

Problem: Produkt wyłącza się automatycznie.

Rozwiązanie: Produkt wyłącza się automatycznie po 5 minutach pracy w każdym trybie. Jeżeli chcesz kontynuować zabieg, naciśnij przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby ponownie uruchomić produkt.

Jeżeli którykolwiek z problemów będzie nadal występował, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażowej.

Informacje o firmie: Shenzhen Migoosmart Co, Ltd.

Adres: RM1701 Building B, Fenghuang ZhiGu, No.SO TieZai Road, Gongle Community, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, China

E-mail: [service@migoosmart.com](mailto:service@migoosmart.com)

Kod pocztowy: 518000

Oficjalna strona internetowa: [www.migoosmart.com](http://www.migoosmart.com)



Usługa WeChat



Oficjalna strona internetowa

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>