


Bańka chińska elektroniczna Humanas BB01



Instrukcja obsługi Język polski

Informacje o produkcie

Elektroniczna bańka chińska Humanas BB01 to innowacyjne urządzenie do masażu i zabiegów leczniczych, które łączy w sobie osiągnięcia starożytnej chińskiej medycyny oraz świat nowych technologii. Terapia próżniowa oferuje wiele korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Masaż z wykorzystaniem urządzenia łagodzi bóle i napięcia, usuwa toksyny z organizmu, poprawia elastyczność skóry, wzmacnia odporność, przyspiesza metabolizm i stymuluje układ limfatyczny oraz krążenie krwi. Bańka Humanas BB01 posiada 12-stopniową regulację mocy oraz temperatury (maks. 50°C). Gorący masaż będzie nieocenionym wsparciem w walce z dolegliwościami. To doskonały wybór dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie, samopoczucie i wygląd, w wygodny i bezpieczny sposób.

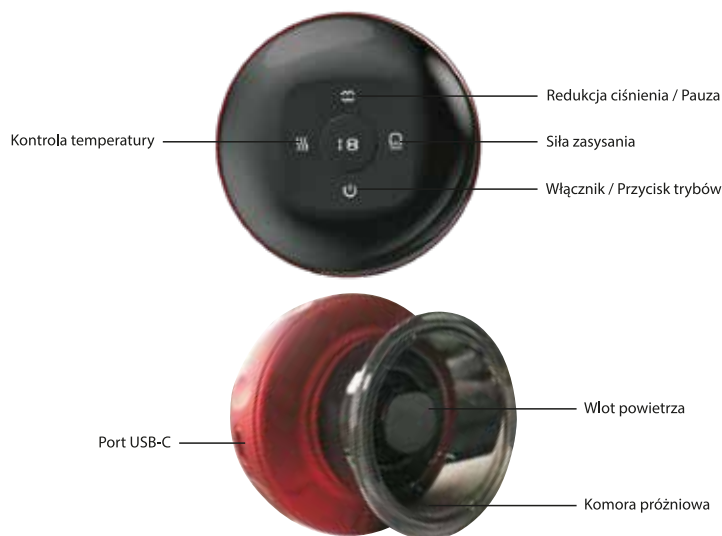

Specyfikacja techniczna

Model	Humanas BB01
Kod produktu	DS-A23
Wymiary	90 x 90 x 78 mm
Prąd ładowania	5 V / 2 A
Siła ssania	- 60 ~0 kPa
Moc	5 W
Norma wykonawcza	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Użytkowanie

Przygotowanie przed użyciem

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się ze środkami ostrożności. Jeśli warunki użytkowania nie są spełnione nie należy korzystać z urządzenia.
- Zaleca się oczyszczenie i nawilżenie skóry mokrym ręcznikiem lub sprayem, aby poprawić komfort użytkowania.
- Sprawdź, czy komora próżniowa jest dobrze przykręcona do urządzenia (wyczyść ją przed i po użytkowaniu za pomocą mokrego ręcznika)
- Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź stan techniczny urządzenia.

Włączanie / zmiana trybów

- Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 1,5 sekundy, aby uruchomić urządzenie. Na ekranie urządzenia wyświetlony zostanie 20 minutowy minutnik oraz wskaźnik temperatury. Po 20 minutach od uruchomienia urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- Kiedy urządzenie jest uruchomione naciśnij włącznik, aby zmienić tryb pracy. Urządzenie posiada dwa tryby pracy: ciągły oraz pulsacyjny.
- Tryb ciągły z włączonym ogrzewaniem jest trybem domyślnym urządzenia.

Moc zasysania

- Domyślnie moc zasysania urządzenia ustawiona jest na wartość 3.
- Naciśnij przycisk siły zasysania, aby dostosować moc do swoich potrzeb. Urządzenie oferuje 12 poziomów siły zasysania.
- Jedno naciśnięcie przycisku siły zasysania zwiększa moc zasysania o 1 poziom. Aktualna moc zasysania wyświetlana jest na wyświetlaczu urządzenia.
- Po osiągnięciu 12 poziomu siły zasysania kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście na poziom 0.
- Zaleca się rozpoczęcie masażu na poziomie 1, kiedy skóra nie jest przyzwyczajona do tego typu masażu.

Kontrola temperatury


- Domyślnie temperatura podgrzewania ustawiona jest na wartość 3. Naciśnij przycisk kontroli temperatury, aby dostosować temperaturę do swoich potrzeb. Urządzenie oferuje 12 poziomów grzania oraz poziom 0 z wyłączoną funkcją podgrzewania.
- Gdy temperatura podgrzewania ustawiona zostanie na 9-ty lub wyższy poziom wskaźniki temperatury zaczną migać różnymi kolorami. Im wyższa temperatura, tym szybsze miganie wskaźników.
- Gdy temperatura osiągnie najwyższy poziom, naciśnij przycisk, aby wyłączyć funkcję ogrzewania (bieg 0) - wskaźnik temperatury zgaśnie.

Redukcja ciśnienia / pauza

Podczas masażu naciśnij przycisk redukcji ciśnienia, aby zwolnić próżnię i móc swobodnie usunąć urządzenie z masowanego miejsca. Po naciśnięciu przycisku redukcji ciśnienia urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

Uwaga 1: W przypadku wykorzystywania podczas masażu płynów takich jak olejki eteryczne olejek należy równomiernie rozprowadzić na skórze, nie pozostawiając żadnych większych skupisk olejku. Urządzenie należy stosować w odpowiedniej pozycji – komorę próżniową skierowaną ku dółowi.

Uwaga 2: Urządzenie wyposażone zostało w filtr zapewniający ochronę urządzenia przed pyłem oraz kroplami olejków. Podczas czyszczenia komory próżniowej sprawdzaj stan filtra, czyści go regularnie lub wymieniaj w razie potrzeby.

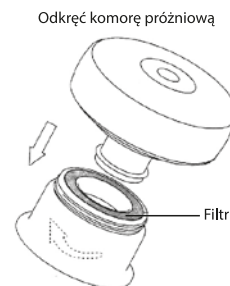

Po wymianie filtra lub wyczyszczeniu komory próżniowej przykręć z powrotem.

Instrukcje ładowania

- Podłącz kabel zasilający do portu USB-C urządzenia. Drugi koniec kabla podłącz do portu USB ładowarki, aby rozpocząć ładowanie.
Wymagany prąd zasilania: 5 V / 2 A.
- Podczas ładowania port ładowania powinien być suchy i czysty. Czas ładowania może się nieznacznie różnić w zależności od warunków otoczenia. Urządzenie nie powinno być podłączone do ładowania dłużej niż 8 h.
- Podczas ładowania biały wskaźnik miga i gaśnie po pełnym naładowaniu.
- Produkt nie może być używany w trakcie ładowania.

Środki ostrożności

NIEBEZPIECZEŃSTWO (zawartość związana z poważnymi obrażeniami ciała spowodowanymi nieprawidłową obsługą)
Nie używaj jednocześnie z następującym sprzętem elektronicznym. Jednoczesne użytkowanie może spowodować błędy lub uszkodzenie instrumentów medycznych i poważnie zagrozić życiu!

- Implanty medyczne takie jak rozrusznik serca.
- Podtrzymujące życie medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak sztuczne serce lub sztuczne płuco.
- Elektrokardiograf i inne elektroniczne instrumenty pomiarowe.
- Inne rodzaje implantów medycznych.

Aby uniknąć dyskomfortu lub obrażeń ciała z urządzenia nie powinni korzystać pacjenci w następujących okolicznościach:

- Ciążę, trwającą miesiączką, uszkodzenia naskórka, żyłaki lub lekoterapia.
- Choroby zakaźne, choroby i nadwrażliwość skóry, stan pooperacyjny, wysoka gorączka lub stan krytyczny.
- Nowotwory złośliwe, miejscowe uszkodzenia lub owrzodzenia, urazowe złamania, ostre ropne zapalenia, utrata elastyczności skóry.
- Nieprawidłowe ciśnienie sercowe, wewnątrzczaszkowe lub ciśnienie krwi.
- Ciężka neurotyczność, drgawki, skurcze i łęki maniakalne.
- Choroby ze skłonnością do krwawień, takie jak małopłytkowość, białaczka, hemofilia, płamica Henocha-Schonleina i inne.
- W pobliżu serca, okolic twarzy, części intymnych lub dużych naczyń krwionośnych na powierzchni ciała.
- Z zaburzeniami percepcji skóry lub nieprawidłową skórą.
- W trakcie trwania leczenia lub złego samopoczucia.
- Nadmierne zmęczenie, niewyspanie, pod wpływem alkoholu i zbyt późne zasypianie (2 godziny przed i po posiłku są również zabronione).
- Uczulenie na metal lub czerwone światło.
- Dzieci, niezdolnych do swobodnego wyrażania swoich życzeń lub niezdolnych do kontaktu z innymi osobami.

W razie wątpliwości co do zastosowania urządzenia w wybranej jednostce chorobowej zapoznaj się z opinią lekarza prowadzącego lub specjalisty.

Uwagi (zawartość związana z poważnymi obrażeniami ciała spowodowanymi nieprawidłową obsługą)

- Produkt należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.
- Podczas korzystania z produktu przezroczysta komora próżniowa powinna ściśle przylegać do skóry i równomiernie się z nią stykać. Podczas korzystania z urządzenia należy unikać kontaktu z ranami i bliznami.
- Element grzewczy urządzenia może powodować oparzenia niskotemperaturowe skóry przy długotrwałym użytkowaniu w jednym miejscu. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy sposób użytkowania urządzenia.
- W przypadku złego samopoczucia w trakcie lub po użyciu urządzenia, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Zaleca się, aby z urządzenia korzystał jeden użytkownik. W przypadku korzystania z urządzenia przez kilku użytkowników należy wyłączyć i wyczyścić przezroczystą komorę próżniową przed użyciem przez kolejną osobę.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli komora próżniowa została uszkodzona.
- Po użyciu tego produktu na skórze mogą pojawić się zaczerwienienia lub wybroczyny, co jest zjawiskiem normalnym. Zwykle zaczynają ustępować naturalnie w ciągu 2 dni (w zależności od poszczególnych typów skóry).
- Podczas długiego użytkowania temperatura produktu może wzrosnąć, co jest normalnym zjawiskiem.
- W przypadku nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie i wyłączyć urządzenie.
- Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla USB-C do ładowania mokrymi rękami, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Ten produkt posiada wbudowany akumulator litowy. Nie należy samodzielnie demontować urządzenia, znanurzać go w wodzie ani wrzucać do ognia, aby zapobiec uszkodzeniu i eksplozji produktu.
- Po użyciu urządzenia naczynia krwionośne na powierzchni skóry w miejscu masażu rozszerzą się. Należy odpocząć przez 45 minut przed kąpielą.

Czyszczenie i konserwacja

Należy przestrzegać zalecanych metod czyszczenia i konserwacji, aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Wytrzyj urządzenie suchą ściereczką z mikrofibry. Nie używaj detergentów, alkoholu, rozcieńczalników, benzyny.
- Po każdym użyciu należy wyłączyć urządzenie i wyczyścić jego komorę próżniową mokrym ręcznikiem.
- Produkt należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.
- Nie należy pozostawiać pozostałości wody na produkcie.
- Do czyszczenia nie należy używać szcetek z twardym włosiem, ani metalowych zmywaków, aby nie uszkodzić powierzchni urządzenia.
- Nie należy używać wody ani innych płynów do bezpośredniego płukania.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go regularnie ładować, aby zapewnić odpowiedni stan techniczny akumulatora.

Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w następujących miejscach:

- Miejsca narażone na wibracje i uderzenia.
- Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wilgoci.
- Miejsca narażone na oddziaływanie silnego pola elektromagnetycznego.
- W pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- W zasięgu dzieci lub zwierząt.

Częste problemy i ich rozwiązania

Problem	Przyczyna problemu i jego rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby uruchomić urządzenie.2. Naładuj urządzenie i spróbuj ponownie.
Nie można naładować urządzenia	<ol style="list-style-type: none">1. Wymień zasilacz lub sprawdź inne gniazdko sieciowe.2. Sprawdź, porty zasilania ładowarki oraz urządzenia nie są zabrudzone lub zanieczyszczone. Jeśli tak, należy je wyczyścić.3. Wymień zasilacz lub kabel ładujący.
Słabe zasysanie	<ol style="list-style-type: none">1. Zdejmij komorę próżniową i dokręć ją ponownie.2. Sprawdź, czy otwory wlotu i wylotu powietrza nie są zablokowane.3. Sprawdź, czy filtr nie wymaga wymiany.
Zbyt niska temperatura nagrzewania	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź, czy funkcja podgrzewania jest włączona i czy wskaźnik temperatury jest włączony.2. Ze względu na wpływ temperatury otoczenia należy zwiększyć poziom podgrzewania.3. Akumulator jest rozładowany, należy go naładować.

Przypomnienie

1. Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy, należy zwrócić uwagę na stopniowe zwiększanie poziomów, aby znaleźć odpowiedni tryb i intensywność.
2. W trakcie masażu, jeżeli próżnia będzie zbyt silna należy nacisnąć przycisk redukcji ciśnienia, aby przerwać pracę lub zmniejszyć ciśnienie i uniknąć dyskomfortu skóry.