

RAVEN

waga łazienkowa z pomiarami

model: EW007



instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.


Opis wagi łazienkowej EW007:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Wyświetlacz | 3. Platforma wagi |
| 2. Przyciski | 4. Elektroda |



Przyciski:

SET	Włączenie, wybór menu i potwierdzenie
▲	W górę
▼	W dół

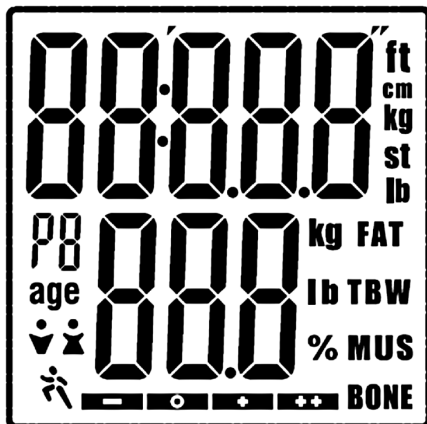

FAT	zawartość tkanki tłuszczowej		mężczyzna
TBW	zawartość wody		wysportowany mężczyzna
MUS	zawartość wody		kobieta
BONE	zawartość kości		wysportowana kobieta
st lb	jednostka masy - kamień		niedowaga
lb	jednostka masy - funt		waga prawidłowa
kg	jednostka masy - kilogram		nadwaga
%	procent		otyłość
ft	jednostka długości - stopa	P8	numer użytkownika
cm	jednostka długości - centymetr	age	wiek

Przed uruchomieniem wagi łazienkowej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.
- Ostrzeżenie! Osoby z rozrusznikiem serca nie mogą korzystać z tego Urządzenia.
- Ostrzeżenie! Kobiety w ciąży nie mogą korzystać z tego Urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ważenia osób.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy pod obciążeniem statycznym.
- Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie zanurzać Urządzenia w wodzie lub innej cieczy.

- Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka Urządzenia.
- Z Urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Upuszczone lub uderzone może przestać działać prawidłowo.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Zapewni to najdokładniejszy pomiar.
- Nie stawaj na wadze mokrymi stopami oraz nie wchodź na mokrą wagę. Grozi to poślizgnięciem.
- Nie stawiaj stóp na krawędziach wagi, aby się nie przechyliła.
- Osoby niepełnosprawne lub osłabione fizycznie powinny korzystać z wagi z pomocą innej osoby. Podczas stawania na wadze powinny używać poręczy lub jej odpowiednika.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia wagi gdyż zbyt duże może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanej wadze.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
- Jeśli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas– wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z Urządzenia. Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie Urządzenia.
- W razie kontaktu ręk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.

- Uwaga! Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.
- Nie ładuj baterii nie przeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami).
- Nie czyść wagi przy użyciu żrących środków czyszczących.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Uwaga! Ryzyko poślizgnięcia się, upadku i obrażeń: gładka powierzchnia wagi może być śliska, gdy jest mokra – korzystaj z wagi ostrożnie. Nie stawaj na wadze jedną stopą w pobliżu jej krawędzi – waga może się przechylić. Przechowuj wagę, jej elementy, opakowanie i baterie poza zasięgiem dzieci.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.

Upewnij się, czy Urządzenie nie nosi śladów uszkodzeń oraz jest sprawne.


WKŁADANIE I WYMIANA BATERII

Baterie znajdują się w zestawie i są zamontowane w Urządzeniu.

Przed pierwszym użyciem zdejmij pasek izolacyjny umieszczony między baterią a komorą na baterie. Jeśli waga nie pokazuje żadnej funkcji, należy skontrolować, czy baterie zostały właściwie założone i ewentualnie włożyć je ponownie.

Wkładanie i wymiana baterii:

1. Kiedy wyświetla się symbol „LO” lub nie wyświetla się nic, należy wymienić baterie na nowe.
2. Otwórz pokrywę komory baterii.
3. Usuń zużyte baterie i oddaj do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.
4. Włóż nowe baterie (2 x CR2032 3V ) , zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
5. Zamknij pokrywę komory baterii.

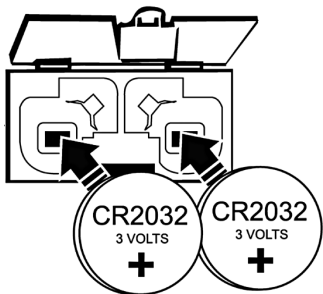

ZMIANA JEDNOSTEK MASY

1. Naciśnij przycisk znajdujący się na spodzie wagi. 
2. Wyświetli się wartość 0.0 wraz z jednostką wagową.
3. Naciskając ponownie przycisk, wybierz żądaną jednostkę masy: kg, lb, st.

4. Można dokonać pomiaru masy ciała lub poczekać na wyłączenie się wagi.

WPROWADZANIE USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKÓW

1. Uruchom wagę naciskając przycisk **SET**.
2. Numer użytkownika **P1** będzie migać. Za pomocą przycisków ▼ (w dół) oraz ▲ (w górę) wybierz numer w zakresie P1 – P8. Każdemu numerowi jest przypisany wprowadzony profil danych użytkownika.
3. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić wybór i przejść do ustawień opcji płci.
4. Za pomocą przycisków ▼ (w dół) oraz ▲ (w górę) wybierz płeć. ♀ dla mężczyzn lub ♂ dla kobiet. Dodatkowo można wybrać opcję dla osób wysportowanych .
5. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić swój wpis. Za pomocą przycisków ▼ (w dół) oraz ▲ (w górę) ustaw wzrost w zakresie 80 – 220 cm.
6. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić swój wpis. Za pomocą przycisków ▼ (w dół) oraz ▲ (w górę) ustaw wiek w zakresie 6 – 100 lat.
7. Naciśnij przycisk **SET**, aby potwierdzić swój wpis.

Wskazówka:

Po przeprowadzeniu ustawień dla jednego użytkownika można przeprowadzić ustawienia dla kolejnych użytkowników (max. 8) lub dokonać pomiaru masy ciała.

Waga wyłączy się po około 10 sekundach, jeśli nie będzie obsługiwana.

POMIAR MASY CIAŁA

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni. Nie zaleca się stawiania wagi na dywanie.
2. Stań na wadze obiema stopami i poczekaj na ustabilizowanie się wyniku.
3. Odczytaj pomiar na wyświetlaczu. Wynik wyświetlany jest ok. 5 sekund, potem waga wyłączy się.
4. Zejdź z platformy wagi.

POMIAR MASY CIAŁA I UDZIAŁU TKANKI TŁUSZCZOWEJ, WODY, MIĘŚNI I KOŚCI

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni. Nie zaleca się stawiania wagi na dywanie.
2. Naciśnij przycisk **SET**. Numer ostatniego użytkownika będzie migać.
3. Wybierz za pomocą przycisków ▼ (w dół) oraz ▲ (w górę) numer użytkownika w zakresie P1 – P8. Każdemu numerowi jest przypisany wprowadzony profil danych użytkownika.
4. Po wybraniu odpowiedniego numeru użytkownika, poczekaj ok. 5 sekund aż na wyświetlaczu pojawi się wartość 0.0.
5. Stań bosymi stopami na platformie wagi. Zwróć uwagę na to, aby stanąć na wszystkich elektrodach.
6. Po ustabilizowaniu się pomiaru, zostaje pokazana masa ciała wraz z jednostką wagową.
7. Rozpocznie się pomiar procentowego udziału tkanki tłuszczowej, wody, mięśni i kości w organizmie. Pomiar ten trwa kilka sekund. Na wyświetlaczu uwidocznione jest odliczanie w postaci zwiększającej się ilości znaków □□□□.


8. Po zakończeniu przeliczeń wyświetlacz LCD wskazuje po kolei, trzykrotnie zmierzone procentowe wartości udziału:

FAT - tkanki tłuszczowej

TBW - wody

MUS – mięśni

BONE - kości

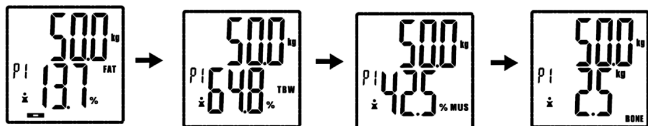

9. Podczas wyświetlania udziału tkanki tłuszczowej, na wyświetlaczu pokazywana jest również informacja graficzna o zawartości tłuszczu w organizmie.



Niedowaga

Waga prawidłowa

Nadwaga

Otyłość

10. Po wyświetleniu tych wartości waga zapisuje wyniki i się wyłącza.

WSKAŹNIKI NA WYŚWIELACZU

- Wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie (180 kg). W przypadku wyświetlenia się tego wskaźnika, należy natychmiast zejść z wagi, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

- L0** Informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Należy niezwłocznie wymienić baterie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem Urządzenia wyjmij baterie z komory baterii.
- Podstawę wagi przecieraj zwilżoną szmatką , a następnie wytrzyj do sucha.

Uwaga!

Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wagi w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model: EW007

Nazwa: Raven

Produkt: waga łazienkowa

Zasilanie wagi: 2 x CR2032 3 V ===

Maksymalne obciążenie:

180 kg / 397 lb

Minimalne obciążenie: 5 kg

Dokładność: 0,1 kg / 0,2 lb

Zestaw: waga łazienkowa, 2 x bateria

CR2032 , instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia Urządzenia są baterie. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

waga łazienkowa

TYP / MODEL


EW007

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY



karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy wagi łazienkowej RAVEN EW007 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Drukulat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska