


INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

ITEM NO/MODEL.: ZL-S1209



Przyrząd do usuwania zmarszczek wokół oczu
Device for removing wrinkles around the eyes

Product Structure Budowa Produktu

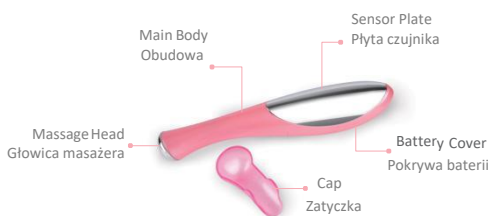

Zdjęcie produktu poglądowe, może różnić się od oryginału


Traits Cechy

- Intelligent design, working automatically, no switch at all. Inteligentny produkt, działa automatycznie, brak przełącznika. Masaż wibracyjny 220 drgań/s, pomaga skórze złagodzić napięcie.
- 220 times/s vibration massage to help your skin relieve tension. Masaż wibracyjny 220 drgań/s, pomaga skórze złagodzić napięcie.
- Iontophoresis and Vibration massage function, anti-wrinkle effect of skin care essence or wrinkle care cream will be doubled at the help of this product. Funkcja jontoforezy i masażu wibracyjnego, działanie przeciwzmarszczkowe esencji pielęgnacyjnej lub kremu pielęgnującego zostanie podwójone przy pomocy tego produktu.
- Introduce nutrition into skin basal layer, refresh skin around eyes; improve blood circulation; reduce eye puffiness, eliminate eye pouch and remove wrinkles. Wprowadza składniki odżywcze do warstwy podstawowej skóry, odświeża skórę wokół oczu; poprawia krążenie krwi; zmniejsza opuchliznę wokół oczu, pomaga usunąć worki pod oczu i zmarszczki.
- Mini & smart massage head, compatible with face T-zone part fully. Głowica masująca Mini & smart, w pełni kompatybilna ze strefą T twarzy.
- Considerate protection cap as accessory to avoid massage head from scratched. Rozważ użycie nakładki ochronnej, aby uniknąć zarysowania głowicy masującej. Pozwala to również oszczędzać energię elektryczną akumulatora przy przypadkowym i nieświadomym uruchomieniu urządzenia.
- Nice looking and ergonomic design, easy to use.ładny i ergonomiczny kształt, łatwość w użyciu.

How To Use SPÓSÓB UŻYCIA



- Take out protective cap, slide out battery cover and insert 1xAAA battery. Zdejmij nasadkę ochronną, wysuń pokrywę baterii i włóż jedną baterię AAA.

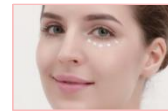

- Apply desired eye care cream or essence on wrinkle part around eyes or mouth area. Nałóż swój krem lub olejek do pielęgnacji na zmarszczki wokół oczu lub ust.



- Gently massage skin around wrinkle part. Make sure contacting the silver plate sensor when use. This instrument will work automatically once massage head and skin contact. Delikatnie masuj skórę wokół zmarszczek. Upewnij się, że skóra ma kontakt ze srebrną płytką czujnika podczas użytkowania. Urządzenie działa automatycznie, gdy następuje kontakt pomiędzy skórą a głowicą masującą.



- Please clean the massage head with a towel or tissue after use, and put on the cap. Po użyciu wyczyść głowicę masującą ręcznikiem lub chusteczką, a następnie umieść na niej zatyczkę.

Acupoint Diagram Schemat punktów akupunktury




- 1 Cuanzhu
- 2 Yuyao
- 3 Sikongzhu
- 4 Jingming
- 5 Sibai
- 6 Tongziliao
- 7 Chengqi


1

2

Using Steps Różne sposoby użycia

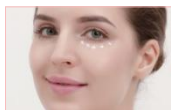

- Daub Eye-cream: daub the wrinkle cream around the eyes, dosage a little more than usual. Nanoszenie kremu wokół oczu: naniś krem przeciwzmarszczkowy wokół oczu, użyj go nieco więcej niż zwykle.

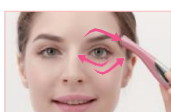


- Relieve Eye Stress: touch and press skin gently by massage head around the eyes from one side to the other side, repaid it 3 times.

Odprężający masaż oczu: dotknij i delikatnie dociśnij urządzenie do skóry głowy, poruszając głowicą masującą wokół oczu z jednej strony na drugą; powtórz 3 razy.




- Acupoint Massage: massage one specific position, to relax eyes and absorb eye cream fully. Massage method: press massage head a bit on point, each point stay for 3 seconds.

Masuj jedno określone miejsce, aby odprężyć oczy i pozwolić kremowi pod oczy się w pełni wchłonąć. Metoda masażu: dociśnij lekko głowicę masującą do danego punktu; w każdym punkcie pozostaw ją na 3 sekundy.

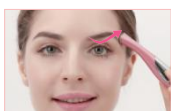

- Gently slide massager head in 45 angle degree towards temples position, lift eye skin.

Delikatnie przesunij głowicę masażu pod kątem 45 stopni w kierunku skroni, unieś skórę wokół oczu.

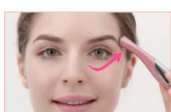

- If eye corner skin prolapsed, advise to do pull & lift action by finger. Finally, using massage head press temple can relieve head pressure.

W przypadku skóry w kąciach oczu radzimy ją podciągnąć na koniec użyj głowicy masującej do odprężającego masażu skroni.

Cautions Ostrzeżenia

Przeciwwskazania

Kobiety w ciąży, metalowe implanty, rozrusznik serca, przerwanie ciągłości skóry, stany zapalne, nowotwory. Produkt powinien być stosowany w okolicach skóry wokół oczu oraz łuku brwiowego, lecz nigdy na powiekach lub gałkach ocznych.

OSTRZEŻENIE!

- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, nad wanną, basenem, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wody.
- Nie dotykaj przewodu USB lub urządzenia mokrymi rękami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać przewodu USB lub urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Nie dotykaj mokrymi rękoma.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno podejmować prób otwierania korpusu lub demontażu jakichkolwiek części urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się żadne części przeznaczone do naprawy.
- Nie używać podczas ładowania.
- Nie używać dłużej w jednym miejscu, dłużej niż automatycznie ustawiony czas.
- Używaj produktu w temperaturze otoczenia pomiędzy 15°C - 40°C
- Ładować i przechowywać produkt należy w temperaturze otoczenia pomiędzy 15°C - 40°C
- Należy unikać zbyt długiego i intensywnego używania urządzenia w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnienia i zaczerwienienia skóry twarzy.
- Należy zwracać uwagę na dzieci by nie bawiły się urządzeniem.
- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
- W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry, należy niezwłocznie przerwać masaż.
- Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.
- Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczną instalację i użytkowanie urządzenia.
- Jeżeli przekazujemy urządzenie osobie trzeciej, musimy przekazać wraz z nim tę instrukcję obsługi.
- Nie przechowuj urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności (łazienka, sauna itp.), wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Urządzenie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
- Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką.
- Zachowaj instrukcję oraz opakowanie.
- To urządzenie wykorzystuje 1 x baterię AAA (brak w zestawie). Należy ją umieścić prawidłowo, zgodnie ze oznaczeniem biegunów w kieszeni na baterię.

SERVICE INFOLINE INFOLINIA SERWISOWA

Tel.: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
Strona główna www.manta.com.pl
Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

Tel.: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl
from Monday to Friday, 9.00-17.00
The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications without notice.
Home: www.manta.com.pl
Home support: www.manta.info.

Skrócona deklaracja CE
MANTA S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia ZL-S1209 jest zgodny z dyrektywami: EMC 2014/30/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie internetowej producenta, pod adresem: www.manta.com.pl



Made in P.R.C.
Importer: MANTA S.A.
ul. Matuszewska 14 C5
03-876 Warszawa

3

4

5