



SOOCAS

Instrukcja Obsługi

SOOCAS Portable Oral Irrigator W3



# Ostrzeżenia

## Ważne

Aby zapobiec błędom, porażeniom, zranieniom, pożarom oraz uszkodzeniom, prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz ostrzeżeniami przed użyciem.

## \*Uwaga

1. Nie należy używać produktu w innych trybach niż podane w instrukcji.
2. Nie należy rozkręcać urządzenia ani wyminąć jego części. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia lub zranień.
3. Nie należy kłaść do gorącej wody powyżej 40°C i nie należy myć swoich ust taką wodą.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody podczas ładowania, należy najpierw wyjąć kabel z zasilania, przed dotknięciem urządzenia.
5. Należy wymienić kabel, jeśli jest uszkodzony.
6. Należy trzymać urządzenie z dala od ognia oraz żaru.

## \*Zabronione

1. Nie należy używać urządzenia do innych celów niż mycie ust.
2. Nie należy dociskać wyłot do dziąsła oraz zębów.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
4. Nie należy wyciągać kabla mokrymi rękoma.
5. Nie należy modyfikować kabla USB, zginać go, obciążać ani nim uderzać.

#### **\*Ważne**

1. Nie należy zostawiać urządzenia w miejscu z wysoką temperaturą lub wilgocią. Nie należy je wystawiać na słońce.
2. Przed konserwacją produktu, upewnij się że jest wyłączony i nie jest ładowany.
3. Nie należy ładować urządzenia w gorących lub wilgotnych miejscach (np. łazience, toalecie, basenie).

#### **\*Przypomnienia**

1. Należy zamontować końcówkę przed użyciem;
2. Nie należy wlewać czystego płynu do ust do urządzenia. Należy go rozcieńczyć przed waniem;
3. Dzieci oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi lub psychicznymi powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem opiekuna;
4. Należy trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką.
5. Osoby z chorobami dziąseł lub po zabiegu ust powinny skonsultować się z doktorem przed użyciem urządzenia.
6. Podczas wkładania lub wyjmowania kabla zasilającego, należy trzymać za wtyczkę, a nie kabel.
7. Jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, należy odłączyć kable.

# Budowa urządzenia



# Dziób

Urządzenie SOOCAS posiada cztery różne typy dzióbków. Końcówki te można zakupić i dostosować do swoich potrzeb.

## Standardowy



Dzióbek ten czyści ciężko dostępne miejsca, jak np. przerwy pomiędzy zębami oraz spód dziąsła. Końcówka ta zmywa zabrudzenia i bakterie oraz zapobiega krwawieniom.

## Ortodontyczny



Końcówka ta jest przeznaczona dla osób z zębami ortodontycznymi. Szybko usuwa pozostałości po jedzeniu na urządzeniu, zapobiega demineralizacji oraz pigmentacji.

## Kieszonkowy



Końcówka ta służy do głębokiego czyszczenia ust z bakterii oraz zarazków. Ciśnienie będzie ustawione na najniższy poziom i należy przyłożyć końcówkę pod kątem 45° na dziąsła i wyczyścić szyjkę.

## Szczotka na język



Końcówka ta służy do czyszczenia języka z osadu i zachowania świeżego oddechu. Należy przyłożyć końcówkę do języka i ustawić ciśnienie na najniższy poziom.

# Obsługa

Przed użyciem produktu, sprawdź czy zasilanie jest odpowiednie. Urządzenie należy naładować do pełna przed pierwszym użyciem. Jeśli dioda świeci się na czerwono, oznacza to że konieczne jest ładowanie.

1. Zamontuj końcówkę do urządzenia i upewnij się, że było słyszalne kliknięcie. Aby wymienić końcówkę, wyłącz urządzenie i naciśnij przycisk dzióbka.


Montaż:



Demontaż:



2. Otwórz pokrywę zbiornika z wodą i trzymaj urządzenie poziomo. Wlej wodę do zbiornika. Po napełnieniu, załóż pokrywę z powrotem.

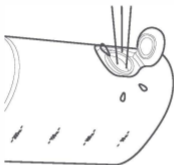

3. Naciskając raz przycisk trybu, możesz wybrać potrzebne ciśnienie wody.



Tryb delikatny: W tym trybie ciśnienie wody jest umiarkowane. Tryb jest zalecany gdy jest to pierwsze mycie lub gdy dziąsła są wrażliwe.



Tryb standardowy: W tym trybie ciśnienie pozwala na dokładne mycie zębów oraz dziąseł. Jest to domyślny tryb zalecany dla większości użytkowników.




Tryb masażu: Urządzenie masuje wodą dziąsła i tym samym polepsza w nich przepływ krwi.





4. Podczas użytkowania tego produktu, przybliż dzióbek do ust i uderzaj wodą wzdłuż przerw pomiędzy zębami oraz dziąsłami.

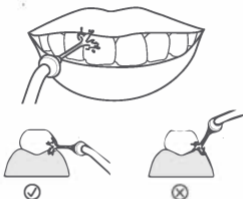

Podczas użytkowania, urządzenie powinno być trzymane pionowo, a dzióbek powinien być skierowany do ust. Gdy urządzenie zostanie przechylone lub obrócone do góry nogami, może ono przeciekać, lecz nie wpłynie to na działanie.






\*Porada: Podczas pierwszego użytkowania, możesz odczuwać podrażnienie i może występować drobne krwawienie. To dlatego, że dziąsło nie jest jeszcze przyzwyczajone do tego sposobu mycia. Efekty uboczne znikają po tygodniu/dwóch użytkowania. Jeśli jednak podrażnienia i krwawienia nadal występują, oznacza to problemy z dziąsłami – należy skontaktować się z dentystą.

5. Naciśnij przełącznik zasilania, aby rozpocząć czyszczenie. Urządzenie automatycznie wyłącza się po dwóch minutach użytkowania. Aby kontynuować, należy ponownie nacisnąć przycisk.

# Dioda stanu mocy

| Dioda gdy urządzenie jest włączone |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 100%-40%                           | Biała dioda się świeci    |
| 40%-10%                            | Czerwona dioda się świeci |
| <10%                               | Czerwona dioda miga       |
| Dioda gdy urządzenie się ładuje    |                           |
| 100%                               | Biała dioda się świeci    |
| 40% - 100%                         | Biała dioda się świeci    |
| <40%                               | Czerwona dioda miga       |

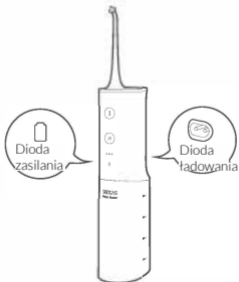

# Czyszczenie oraz konserwacja

Produkt należy czyścić czystą wodą lub nie-żrącym detergentem. Nie należy przemywać gorącą wodą.

- Czyszczenie obudowy: obudowę należy czyścić suchą lub moką szmatką. Nie należy zanurzać urządzenia.
- Czyszczenie zbiornika: zbiornik należy czyścić suchą lub moką szmatką. Jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, uruchom go by pozbył się resztki wody.
- Czyszczenie dzióbka: końcówkę należy czyścić suchą lub moką szmatką. Można również ją zdjąć i przemyć pod wodą. Nie należy zginać lub skręcać końcówki.
- Czyszczenie kabla: metalową końcówkę należy przetrzeć suchą szmatką, jako że z czasem może gromadzić kurz.



\* Zaleca się wymieniać końcówkę raz na sześć miesięcy.

# Rozwiązywanie problemów

| Problem   | Powód                                 | Rozwiązanie                 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| Produkt nie działa                                  | Urządzenie nie było długo używane     | Naładuj urządzenie          |
| Niskie ciśnienie wody                               | Wylot jest zablokowany lub uszkodzony | Wymień końcówkę             |
| Dioda ładowania działa nieprawidłowo lub nie działa | Uszkodzony obwód                      | Oddaj urządzenie do serwisu |
|   | Złe połączenie                        | Poprawnie podłącz kabel     |
| Urządzenie nie działa po naładowaniu                | Zbyt krótki czas ładowania            | Naładuj urządzenie ponownie |
|   | Uszkodzony obwód                      | Oddaj urządzenie do serwisu |

## Ochrona środowiska

Produkt ten zawiera akumulator przeznaczony do ponownego ładowania. Gdy żywotność akumulatora się skończy, należy wyjąć akumulator przed utylizacją urządzenia. Akumulator należy zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem.

# Parametry

Nazwa urządzenia: SOOCAS Portable Oral Irrigator

Model: W3

Sposób ładowania: USB

Moc wejściowa: 5V $\overline{=}$ 1A

Czas ładowania: 4 do 6 godzin

Kraj pochodzenia: Chiny

Standardy: GB4706.1-2005  
GB4706.59-2008  
Q/SKS 010-2018

# Zawartość szkodliwych substancji

| Szkodliwe substancje |           |           |           |                              |                                |                                       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Element              | Ołów (Pb) | Rtęć (Hg) | Kadm (Cd) | Hexawalent chromium (Cr(VI)) | Polybrominated biphenyls (PBB) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| Plastik              | ○         | ○         | ○         | ○                            | ○                              | ○                                     |
| Płyta główna         | ○         | ○         | ○         | ○                            | ○                              | ○                                     |
| Silnik               | ○         | ○         | ○         | ○                            | ○                              | ○                                     |
| Obwody               | ✕*        | ○         | ○         | ○                            | ○                              | ○                                     |
| Kabel                | ○         | ○         | ○         | ○                            | ○                              | ○                                     |
| <b>Akcesoria</b>     | ○         | ○         | ○         | ○                            | ○                              | ○                                     |

Tabela ta została sporządzona w zgodności z SJ/T 11364.

O: oznacza, że zawartość szkodliwych substancji znajduje się w zakresie przedstawionym w GB/T 26572.

X: oznacza, że zawartość szkodliwych substancji przekracza zakres przedstawiony w GB/T 26572.

A: oznacza, że element ten spełnia wymagania co do zawartości szkodliwych substancji w ramach wyjątku EU (2011/65/EU).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.





[www.socas.com](http://www.socas.com)

SOCAS