


SOOCAS

Instrukcja obsługi

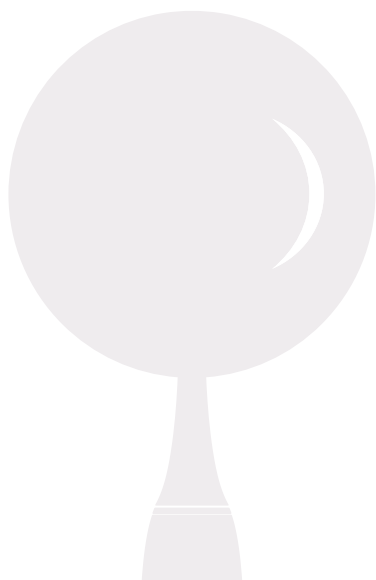

SOOCAS Sonic Electric Toothbrush X3 Pro

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

Ostrzeżenie

1. Osoby (w tym dzieci) nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy oraz z różnego rodzaju zaburzeniami lub niepełnosprawnością mogą obsługiwać i czyścić urządzenie wyłącznie pod nadzorem opiekunów.
2. Nie wolno ładować urządzenia w wilgotnym otoczeniu.
3. Urządzenie nie jest zabawką przeznaczoną dla dzieci.
4. Użytkownicy z aparatami ortodontycznymi, wypełnieniami i implantami zębów powinni korzystać z urządzenia pod opieką stomatologa.
5. Opisywane urządzenie spełnia wymagania norm bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. W przypadku użytkowników z rozrusznikami serca lub innymi implantami, przed użyciem szczoteczki elektrycznej należy skonsultować się z lekarzem lub producentem takiego urządzenia.
6. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do mycia zębów, dziąseł i języka. Nie należy używać go do innego celu. W przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu należy zaprzestać używania szczoteczki i skonsultować się z lekarzem.
7. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić na odpowiedni przewód element zakupiony od producenta SOOCAS bądź działu pomocy technicznej.
8. Port do ładowania powinien być suchy przed rozpoczęciem ładowania.
9. Podczas ładowania urządzenie powinno być kontrolowane. Czas ładowania nie może przekroczyć 24 godzin.


Uwaga

1. Podczas korzystania z urządzenia przez kilka pierwszych dni w ustach może pojawiać się uczucie swędzenia lub krwawienie dziąseł. Wynika to z tego, że dziąsła i język nie są przystosowane do mycia z tak wysoką częstotliwością, co jest naturalnym zjawiskiem, które na ogół ustępuje po kilku dniach używania szczoteczki.
2. Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Nie wolno wrzucać go do ogniska ani ładować, używać i przechowywać w wysokiej temperaturze.
3. Nie wolno samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać urządzenia.
4. Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki o napięciu 5 V (sprzedawanej oddzielnie).

Środki bezpieczeństwa

1. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma na nim widocznych śladów uszkodzeń. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub działa wadliwie, nie należy go używać.
2. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy sprawdzić, czy lokalna sieć elektryczna jest kompatybilna z parametrami urządzenia.
3. W razie wykrycia jakichkolwiek oznak uszkodzeń (uchwyty, głowicy szczoteczki lub pojemnika do sterylizacji) należy zaprzestać obsługi.
4. Nie wolno korzystać z urządzenia podczas kąpieli ani prysznica.

Szczegółowy opis produktu

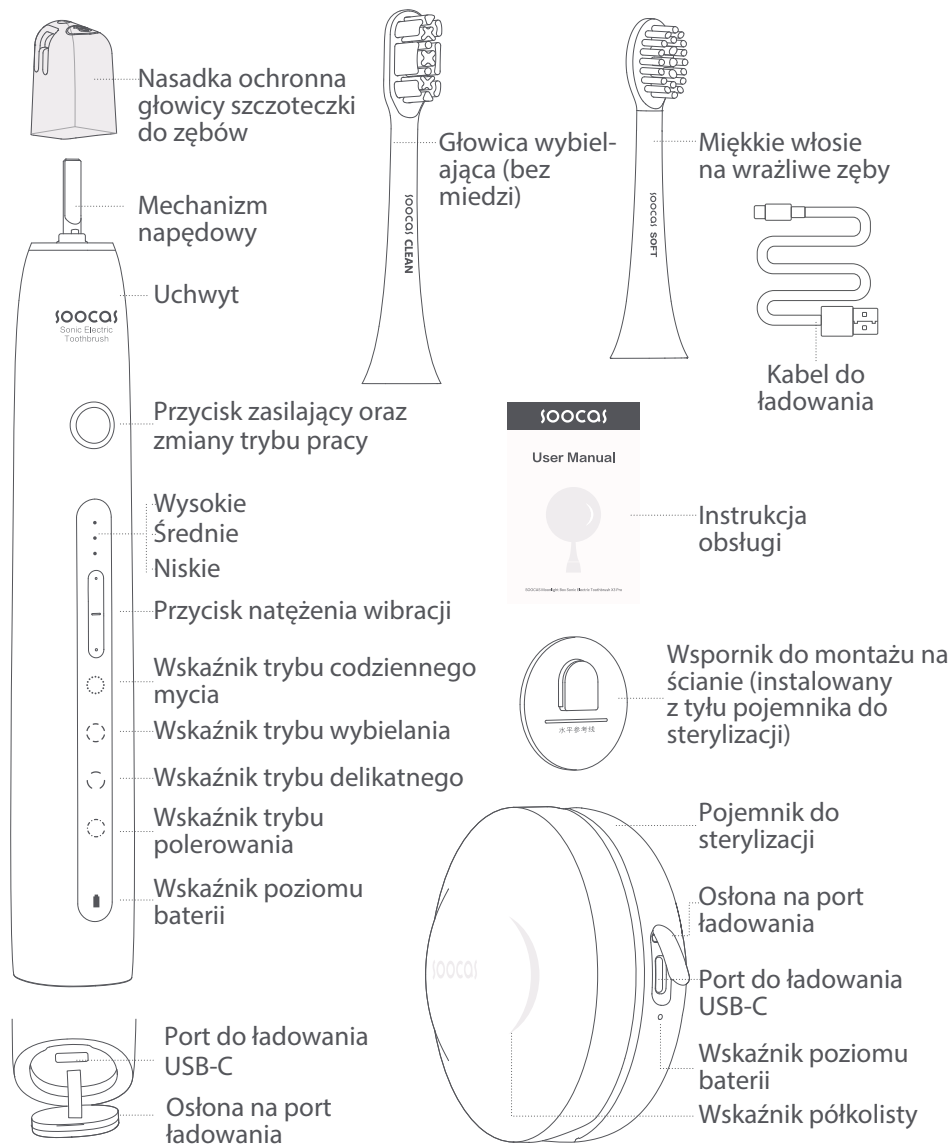

Wskazówki: Ilustracje produktu, akcesoriów, interfejsu użytkownika i innych elementów w instrukcji mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Z uwagi na aktualizacje i uaktualnienia produktu jego rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na schemacie. Rzeczywista konstrukcja urządzenia jest istotna.

Oczyszczanie powierzchni ściany

Znajdź odpowiednie miejsce na ścianie. Oczyść powierzchnię ściany i upewnij się, że jest sucha. Pojemnik do sterylizacji można przymocować do płaskiej i gładkiej ściany, np. kafelków lub szkła. Nie wolno mocować pojemnika na ścianie z dekoracjami ani innymi nierównościami.


Montaż

Przesuń mocowany na ścianie uchwyt z tyłu pojemnika, ściągnij taśmę z tylnej części uchwyty, dostosuj położenie uchwyty do poziomej linii odniesienia i przymocuj uchwyt do ściany w odpowiednim miejscu. Na koniec, przytrzymaj nacisk przez co najmniej minutę. To pozwoli zapewnić prawidłowe mocowanie.

Uwaga: Po mocnym dociśnięciu uchwyty do ściany, przed zainstalowaniem pojemnika do sterylizacji należy odczekać 24 godziny.

Instalowanie i obsługa pojemnika do sterylizacji

Po skierowaniu otworu pojemnika do sterylizacji w dół, wyrównaj otwór z tyłu pojemnika względem uchwyty na ścianie oraz przypnij pojemnik do haka. Następnie delikatnie pociągnij pojemnik w dół, aby dokończyć instalację. Podczas korzystania z pojemnika do sterylizacji zawiesz szczoteczkę i zamknij wieczko, aby automatycznie rozpocząć ten proces.

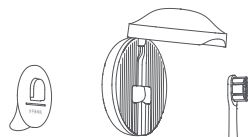


Środki ostrożności

- Uchwyt nie może zostać zamocowany na ścianie bez odpowiedniej wytrzymałości ani na nierównej powierzchni.
- Po zamocowaniu uchwyty na ścianie nie należy go zdejmować ani ponownie mocować, ponieważ mogłoby to prowadzić do obniżenia skuteczności.
- Nie należy używać pojemnika do sterylizacji w celu oczyszczania innych przedmiotów niż szczoteczka elektryczna SOOCAS X3 Pro z pojemnikiem Moonlight Box, aby uniknąć nadmiernego obciążenia, które skróciłoby żywotność pojemnika.

Prawidłowe sposoby pielęgnacji


Montaż głowicy szczoteczki

Głowica szczoteczki została poddana sterylizacji promieniami ultrafioletowymi, natomiast opakowanie próżniowe jest czyste i higieniczne. Z włosiem skierowanym do przodu uchwytu szczoteczki, włóż element do otworu w dolnej części głowki szczoteczki. Po usłyszeniu kliknięcia instalacja będzie zakończona.

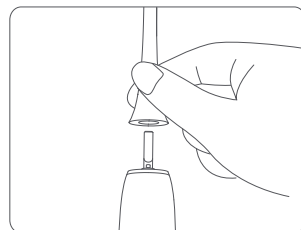


Prawidłowe mycie

Nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów. Nie ma potrzeby zanurzania pasty w wodzie, w celu zwiększenia efektów czyszczenia. Naciśnij przycisk zasilający i przycisk natężenia wibracji, aby wybrać ustawienia według preferencji, a następnie przesuwaj powoli głowicą szczoteczki po powierzchni zębów, nie korygując ruchów szczoteczki.

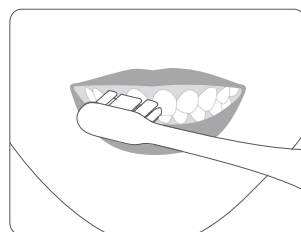

Automatyczna sterylizacja

Po umyciu zębów przepłucz głowicę szczoteczki i uchwyt, a następnie dokładnie wysusz. Otwórz wieczko pojemnika do sterylizacji i powieś w nim szczoteczkę, zwróconą przodem do siebie. Pojemnik do sterylizacji nie posiada żadnego przycisku. Wystarczy zamknąć wieczko, aby rozpocząć sterylizację szczoteczki trwającą około pięć minut.

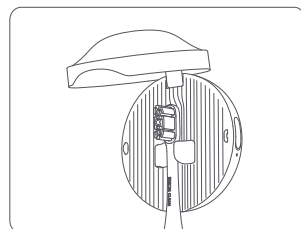

SOOCOS
Sonic Electric
Toothbrush




Trzy ustawienia natężenia wibracji

Ustaw odpowiednie natężenie wibracji szczoteczki.

Tryb codziennego mycia

Standardowy tryb nadaje się do codziennego stosowania. Wibracje o dużej częstotliwości potrafią szybko usuwać kamień nazębny i inne zanieczyszczenia.

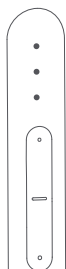

Tryb wybielania

Ostrożnie dostosowany tryb wybielania jest bardziej odpowiedni do głębokiego usuwania uporczywych odbarwień na powierzchni zębów. Efekt wybielenia może się utrzymywać przez cztery tygodnie.



Tryb delikatny (zalecany przy pierwszym użytkowaniu)

Delikatny tryb pracy jest przeznaczony dla wyjątkowo wrażliwego uzębienia i dla osób, które pierwszy raz korzystają z elektrycznej szczoteczki.



Tryb polerowania

Zmiana wibracji na poziom wysoki i niski umożliwia polerowanie i wybielenie powierzchni zębów przy efekcie typowym dla głębokiego mycia. Tryb ten nadaje się także do usuwania odbarwień od kawy, herbaty i tytoniu.



Stan włączenia

W ciągu 15 sekund od włączenia szczoteczki można nacisnąć wyłącznik, aby zmienić tryb jej pracy. Jeżeli szczoteczka jest włączona, można nacisnąć przycisk natężenia wibracji, aby dostosować jej wartość.

Stan wstrzymania

Podczas szczotkowania można nacisnąć i przytrzymać wyłącznik przez 1 sekundę, aby przejść do trybu wstrzymania. Wskaźnik trybu pracy i wskaźnik poziomu akumulatora przejdą w stan migania. Naciśnij wyłącznik ponownie, aby kontynuować szczotkowanie. (Jeśli szczoteczka nie zostanie ponownie uruchomiona po 30-sekundowej przerwie, nastąpi jej automatyczne wyłączenie.)

Przypomnienie o naładowaniu

Jeśli wskaźnik poziomu akumulatora szczoteczki miga na czerwono, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski. Należy naładować baterię w dogodnej chwili.

Stan ładowania

W trakcie ładowania wskaźnik poziomu akumulatora powinien migać. Gdy poziom akumulatora osiągnie <80%, czerwone światło zacznie migać. Gdy poziom sięgnie 80%, zielone światło zacznie migać. Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany (100%), wskaźnik zaświeci się na zielono, a ładowanie dobiegnie końca.

Pełne naładowanie akumulatora

Szczoteczka elektryczna SOOCAS została w pełni naładowana przed zamknięciem w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu mógł nastąpić naturalny spadek energii. Możesz użyć szczoteczki po wyjęciu z opakowania.

Tryb czuwania

Akumulator szczoteczki elektrycznej SOOCAS zapewnia czas gotowości do 180 dni po całkowitym naładowaniu. Rzeczywisty czas gotowości zależy od wybranego trybu pracy i natężenia wibracji.

Port ładowania

Szczoteczka posiada port do ładowania USB typu C. Można użyć standardowego kabla do ładowania akumulatora. (najpierw należy usunąć pyłoszczelną osłonę na dole szczoteczki). Akumulator powinien naładować się do pełna w około 6 godzin.

Uwaga

Podczas korzystania ze szczoteczki, osłona na port ładowania powinna być prawidłowo domknięta, aby zachować wodoszczelność urządzenia. Po zakończeniu użytkowania, nie należy otwierać osłony.

Pojemnik Moonlight Box

Tryb czuwania do 30 dni

Po każdym umyciu zębów pojemnik Moonlight Box umożliwi sterylizację głowicy szczoteczki. Można z niego korzystać regularnie przez 30 dni, jeżeli posiada w pełni naładowany akumulator.

Stan wskaźników informacyjnych

Stan roboczy: Wskaźnik półkolisty świeci przez 5 minut. Jeśli podczas pracy pojemnika do sterylizacji jego wieczko zostanie otwarte, nastąpi zatrzymanie sterylizacji.

Niski poziom akumulatora: Podczas sterylizacji, wskaźnik półkolisty będzie wolno migać przez trzy sekundy, a następnie zacznie świecić. Jeżeli wskaźnik poziomu akumulatora zacznie wolno migać na czerwono, należy naładować urządzenie.

Brak zasilania: Wskaźnik półkolisty i wskaźnik poziomu akumulatora szybko migają, a następnie się wyłączają.

Alarm informujący o uszkodzeniu: Jeśli dojdzie do uszkodzenia lampy sterylizacyjnej UVC, wskaźnik półkolisty będzie szybko migać przez 1 sekundę i wyłączy się, a wskaźnik poziomu akumulatora będzie migać przez 3 sekundy i zacznie świecić (na 10 sekund), a następnie się wyłączy. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z działem pomocy technicznej SOOCAS.

Port ładowania pojemnika Moonlight Box

Aby naładować pojemnik Moonlight Box, usuń go z uchwytu mocowanego na ścianie. Wyciągnij osłonę na port ładowania i sprawdź, czy port jest suchy. Użyj standardowego kabla do ładowania, aby rozpocząć ładowanie. Do całkowitego naładowania potrzeba około pięciu godzin.

Regularne czyszczenie i konserwacja szczoteczki do zębów oraz pojemnika do sterylizacji

1. Wypłucz szczoteczkę po użyciu.

Po każdym użyciu wypłucz głowicę szczoteczki wodą, a następnie (co kilka dni) usuń jej głowicę, aby dokładnie ją wyczyścić.

*Zaleca się używanie jednej głowicy szczoteczki przez maksymalnie trzy miesiące.

Jeśli włosie szczoteczki postrzępi się, należy bezzwłocznie wymienić głowicę szczoteczki.

2. Po płukaniu zawieś szczoteczkę w pojemniku do sterylizacji.

Po opłukaniu szczoteczki pozostaw ją do wyschnięcia, a następnie zawieś szczoteczkę w pojemniku do sterylizacji. Zapobiega to powstawaniu pleśni na dole uchwytu na skutek gromadzenia się wody.

3. Podróżowanie ze szczoteczką.

Przed podróżą usuń głowicę szczoteczki z uchwytu, przetrzyj uchwyt i głowicę szczoteczki, a następnie umieść je w pojemniku do przechowywania. Nie ładuj urządzenia za pomocą ładowarki o niestandardowych lub zbyt niskich parametrach.

4. Czyszczenie pojemnika Moonlight Box

Pojemnik do sterylizacji jest odporny na wilgoć, ale nie należy go myć pod bieżącą wodą. Jeśli konieczne jest usunięcie plam pasty do zębów lub kurzu z pojemnika, przetrzyj jego zewnętrzną powierzchnię i uchwyt zwilżonym ręcznikiem lub papierową chusteczką.


5. Przetrzyj pojemnik do sterylizacji

Pojemnik do sterylizacji Moonlight Box jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Zaleca się pozostawienie pojemnika Moonlight Box w domu na czas podróży ze szczoteczką. Pojemnik Moonlight Box można tylko przetrzeć, nie należy go płukać podczas codziennego mycia i konserwacji.

Standardowa metoda szczotkowania

Głowica skierowana pod kątem 45°

Skierowanie szczoteczki pod kątem 45° pozwala na precyzyjne usuwanie zabrudzeń, które gromadzą się w kiesionkach dziąsłowych.

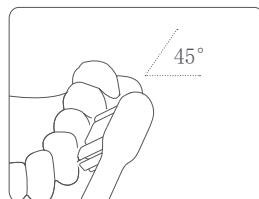


Szczotkowanie poziome

Nie szczotkuj zębów, wykonując obszerne ruchy, ponieważ może to spowodować zranienie dziąseł. Szczoteczka automatycznie zacznie wibrować z wysoką częstotliwością. Wystarczy poruszać szczoteczką na odległość 2-3 zębów.



Równomierne szczotkowanie w czterech strefach

Uzębienie jest podzielone na cztery strefy. Szczotkuj zęby w każdej strefie po stronie zewnętrznej, okluzyjnej i wewnętrznej przez 30 sekund. Szczoteczka wstrzyma pracę, aby poinformować o przejściu do kolejnej strefy. Szczotkowanie można zakończyć po dwóch minutach.

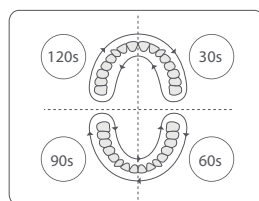

Wskazówki

Jeśli masz wrażenie, że pasta do zębów nie rozprowadza się równomiernie, możesz ją nałożyć ręcznie na powierzchnię zębów w czterech strefach przed rozpoczęciem szczotkowania.

Prawidłowy recykling urządzenia

Informacja o ochronie środowiska

Przed utylizacją urządzenia zapoznaj się z przepisami i regulacjami krajowymi lub lokalnymi, ponieważ istnieje możliwość, że konieczne będzie wyjęcie wbudowanego akumulatora. Jeżeli nie da się usunąć akumulatora, urządzenie należy przekazać do zakładu recyklingu wskazanego przez organ administracji.

Ostrzeżenie

1. Nie należy wrzucać akumulatora do ognia, aby nie doszło do wybuchu lub uwolnienia toksycznych i niebezpiecznych substancji.
2. Nie należy doprowadzać do zwarcia akumulatora, ponieważ mogłoby to skutkować zapłonem i pożarem.
3. Jeżeli nie jest planowana utylizacja urządzenia, nie należy go demontować. Przedwczesny demontaż urządzenia spowoduje jego uszkodzenie. Urządzenia należy używać, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed usunięciem akumulatora należy odłączyć źródło zasilania.


Przed demontażem należy się upewnić, że akumulator jest rozładowany. Jeśli konieczne jest rozładowanie akumulatora, należy pozostawić urządzenie włączone, aż wyłączy się automatycznie.

Sposób usuwania akumulatora:

1. Wsuń płaski wkrętak do szczeliny między pyłoszczelną zatyczką gumową na uchwycie i korpusem urządzenia, a następnie podważ nim zatyczkę w celu otwarcia i usunięcia.




2. Za pomocą płaskiego wkrętaka podważ i wyjmij dwa symetryczne zapięcia wewnętrzznego uchwytu.

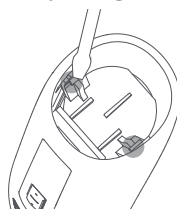


3. Przechodząc do kroku 2, naciśnij jeden koniec wałka, opierając go o twarde przedmiot, przytrzymaj korpus urządzenia i pchnij jego rdzeń, aby go wysunąć.




4. Zerwij lekką folię ochronną.

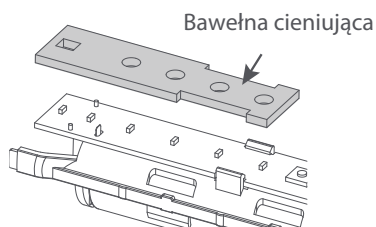

5. Wbij się między tworzywo wskazane strzałką i płytkę drukowaną, używając szczyptec ukośnych, tak aby oderwać stop lutniczy akumulatora.

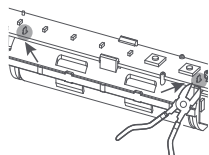


6. Wyjmij akumulator i umieść go w pojemniku do recyklingu.

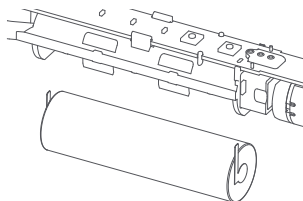


Sposób usuwania akumulatora z pojemnika do sterylizacji:


1. Wsuń płaski wkrętak do szczeliny między pierścieniem dekoracyjnym i dolną pokrywą, a następnie podważ nim pierścień w celu otwarcia i usunięcia.

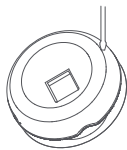


2. Po usunięciu pierścienia z dolnej pokrywy wykręć cztery śruby za pomocą wkrętaka.

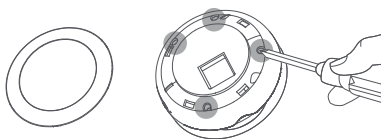

3. Po wykręceniu czterech śrub odwróć pojemnik do sterylizacji i za pomocą płaskiego wkrętaka podważ górną pokrywę od strony szczeliny, jak pokazano na rysunku.

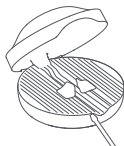

4. Zdejmij górną pokrywę, przetnij dwa przewody zasilające szczypcami do cięcia, usuń akumulator i umieść go w pojemniku do recyklingu.

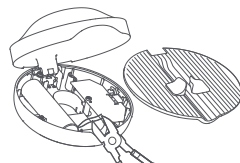

Specyfikacja

Nazwa produktu: Elektryczna szczoteczka do zębów SOOCAS z pojemnikiem Moonlight Box

Model urządzenia: X3 Pro

Wartość znamionowa wejścia szczoteczki: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Wartość znamionowa wejścia pojemnika: 5 V $\overline{\text{---}}$ 0.5 A

Czas ładowania: Około 6 godzin (szczoteczka) oraz 5 godzin (pojemnik Moonlight Box)

Tryb ładowania: Typ C

SOOCAS

<https://soocastech.com/>



<https://www.facebook.com/SoocasGlobal>



https://www.instagram.com/soocas_global/

Producent: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.

Adres: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China



Rozwiązywanie problemów

| Problem | Możliwe przyczyny | Rozwiązanie |
|--|--|---|
| Nie można włączyć urządzenia. | Urządzenie jest w trakcie ładowania. | Zatrzymaj ładowanie. |
| | Poziom akumulatora jest niski lub akumulator uległ wyczerpaniu. | Naładuj urządzenie. |
| | Wyłącznik jest wadliwy. | Prześlij urządzenie do centrum naprawy. |
| Głowicy szczoteczki nie można wsunąć do korpusu urządzenia. | W gnieździe głowicy szczoteczki lub mechanizmie napędowym są zanieczyszczenia. | Usuń ciała obce. |
| | Głowica szczoteczki została zamocowana odwrotnie. | Sprawdź instrukcję instalacji głowicy szczoteczki. |
| | Głowica szczoteczki nie posiada certyfikatu. | Zakup głowicę szczoteczki w oficjalnym kanale sprzedaży. |
| Częstotliwość wibracji szczoteczki jest niska.. | Głowica szczoteczki nie jest prawidłowo zamocowana. | Sprawdź instrukcję instalacji głowicy szczoteczki. |
| Krwawienie dziąseł po szczotkowaniu | Przystosowywanie się dziąseł i jamy ustnej do mycia szczoteczką elektryczną może trochę potrwać. | Użyj trybu delikatnego i minimalnego natężenia wibracji, aby szczotkować zęby we właściwy sposób. |
| Funkcja ładowania nie działa prawidłowo. | Nieprawidłowe połączenie z portem do ładowania | Ponownie podłącz ładowarkę. |
| | Ładowarka może być uszkodzona. | Wymień ładowarkę. |
| Wskaźnik nie działa prawidłowo lub nie włącza się. | Zbyt niski poziom akumulatora. | Podłącz kabel USB do urządzenia w celu jego naładowania. |
| | Doszło do uszkodzenia płytki drukowanej. | Prześlij urządzenie do centrum naprawy. |
| Wskaźnik pojemnika do sterylizacji szybko miga, a następnie się wyłącza. | Zbyt niski poziom akumulatora. | Podłącz kabel USB do urządzenia w celu jego naładowania. |
| | Doszło do uszkodzenia lampy UVC. | Prześlij urządzenie do centrum naprawy. |